

KANUDA® **GOLD LABEL CANTABILE**





A stylized, handwritten signature in black ink.

Создатель KANUDA®
мануальный терапевт
доктор
Ким Хи-Су

KANUDA®

GOLD LABEL CANTABILE

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДУШКА

Улучшает качество сна и жизни!

Содержание

04 Характеристики | Сертификаты

05 Структура

06 Особенности

08 Кому рекомендовано | Способ использования

10 Меры предосторожности

Характеристики

Комплектация	Подушка CANTABILE, наволочка, чехол для хранения, инструкция по эксплуатации, коробка
Материал	Пенополиуретан (tensegrity memory foam)
Размер	601мм x 285мм x 122мм
Вес	1380г (±5%)

Сделано в Корее


Сертификаты

Задекларировано в соответствии с TP TC 017/2011 (EAC)
Сертифицировано в США (FDA)
Рекомендовано Корейской Ассоциацией Физиотерапии (KPTA)
Международный патент PCT (10-1474820)
Регистрация товарного знака KANUDA (0037856, 1126274, 0054256, 0054257)

ISO 9001 (01103/TIC09D)


ISO 14001 (01103/TIC14D)

Структура

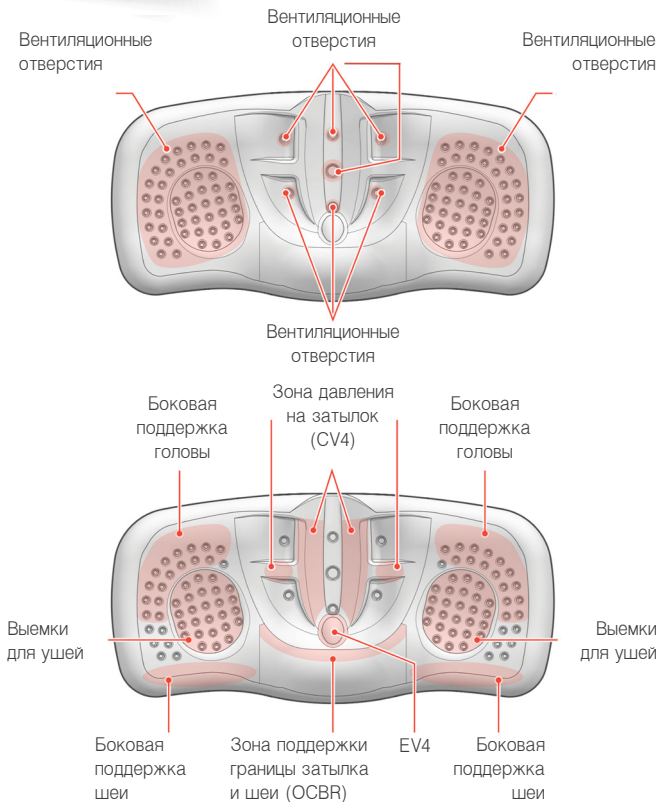


Особенности

Поддержка верхней части
шейного отдела

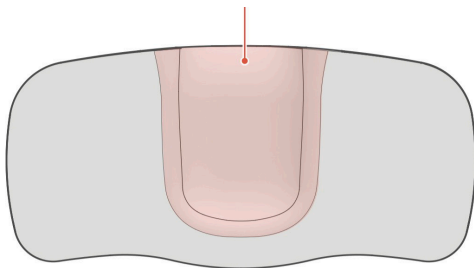

Поддержка верхней части
шейного отдела

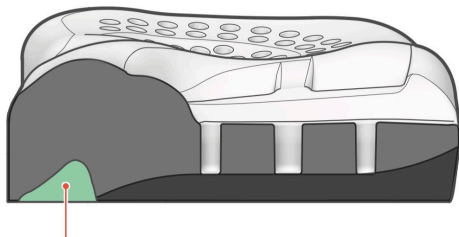


Зона поддержки границы
затылка и шеи (ОСВР)


Особенности

Принцип действия подушки KANUDA

Почувствуйте особенности конструкции, состоящей из выступа (техника ОСБР), поддерживающего верхнюю часть шеи, и конструкции, охватывающей затылок (техника CV4).

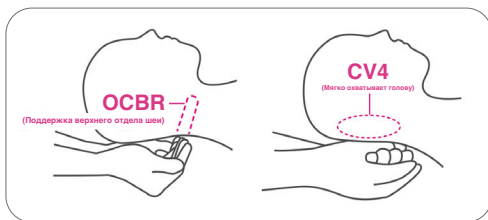

Самая мягкая и комфортная подушка в линейке Kanuda с оптимальным распределением давления тела.

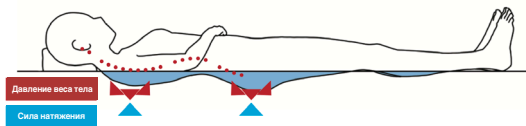

Кому рекомендовано



Рекомендуется людям, которым трудно заснуть.



Рекомендуется тем, кто предпочитает высокие подушки, но при этом не хочет отказываться от правильного положения тела во время сна.



Сочетает запатентованную конструкцию Kanuda с привычной высотой и мягкостью для комфортного сна.


Способ использования

1. Расположите голову и шею в центральной части подушки. Шейно-затылочный переход должен находиться на ее опорной зоне. При необходимости слегка измените положение до ощущения комфорта.




Способ использования

2. При положении лежа на боку голова и шея располагаются на одной горизонтальной линии с позвоночником, благодаря чему сводится к минимуму давление на позвоночник и плечи, которое может препятствовать глубокому сну.

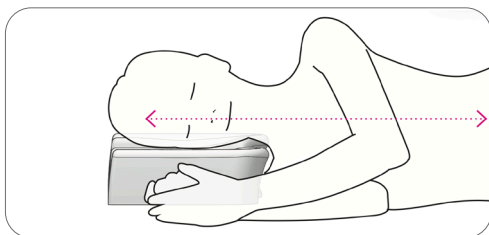

3. При сне на боку расположите лицо и подбородок ближе к подушке. Согните верхнюю ногу и выпрямите нижнюю. Такое положение способствует растяжению подвздошно-поясничной мышцы. За 10 минут до пробуждения выполните это упражнение на каждом боку, чтобы уменьшить скованность после сна.

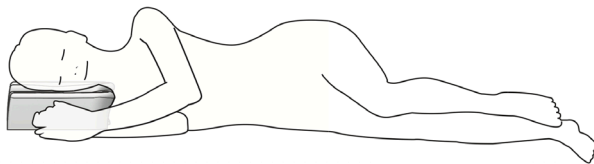

Меры предосторожности

1

стирка



Разрешено стирать только съемную наволочку машинным или ручным способом. Из-за риска порчи и деформации подушку и ее водонепроницаемый чехол стирать запрещено.

2

каждые

3—4

месяца

Рекомендуется каждые 3-4 месяца проветривать подушку в течение 6 часов без попадания прямых солнечных лучей (в тени).

3



Избегайте контакта основного материала подушки (пенополиуретана) с водой. Это может сделать ее непригодной для дальнейшего использования.

4



Используйте подушку на ровной устойчивой поверхности. Не кладите ее на край кровати, чтобы избежать перегиба.

5



Не размещайте подушку на горячих поверхностях, таких как электрический мат или теплый пол. Это может привести к деформации материала.

Меры предосторожности

6



Не сгибайте подушку наружу и не складывайте ее пополам. Это может повредить сердечник, который интегрирован в основание и несет важную функцию.

7



Не кладите на подушку тяжелые предметы.

8



Не пытайтесь изменить размер и форму подушки.
Не упаковывайте в вакуум.

9



инструкция

Для правильного обращения с подушкой прочитайте внимательно инструкцию и следуйте ее правилам и рекомендациям.



Товар не подлежит возврату и обмену, если его порча произошла по причине не соблюдения правил, установленных инструкцией. Данный товар не является изделием медицинского назначения.



Импортёр / Продавец в России и СНГ:

ИП Рахматулин Денис Сафарович
ул. Тургенева д. 48 - 356, г. Хабаровск, Россия
тел. 8 800 550 3970
www.kanuda.ru

Импортёр / Продавец в Казахстане:

ТОО «Smart Sapiens»
Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Самал-2, д.77А
www.kanuda.kz

Изготовитель:

TNI Co. Ltd (ТиЭнАй Ко. Лтд)
18, 319 beon-gil, Sure-ro, Wabu-eup,
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea (Корея)
тел. 82 31 792 6912
www.kanuda.com